


SKY temp

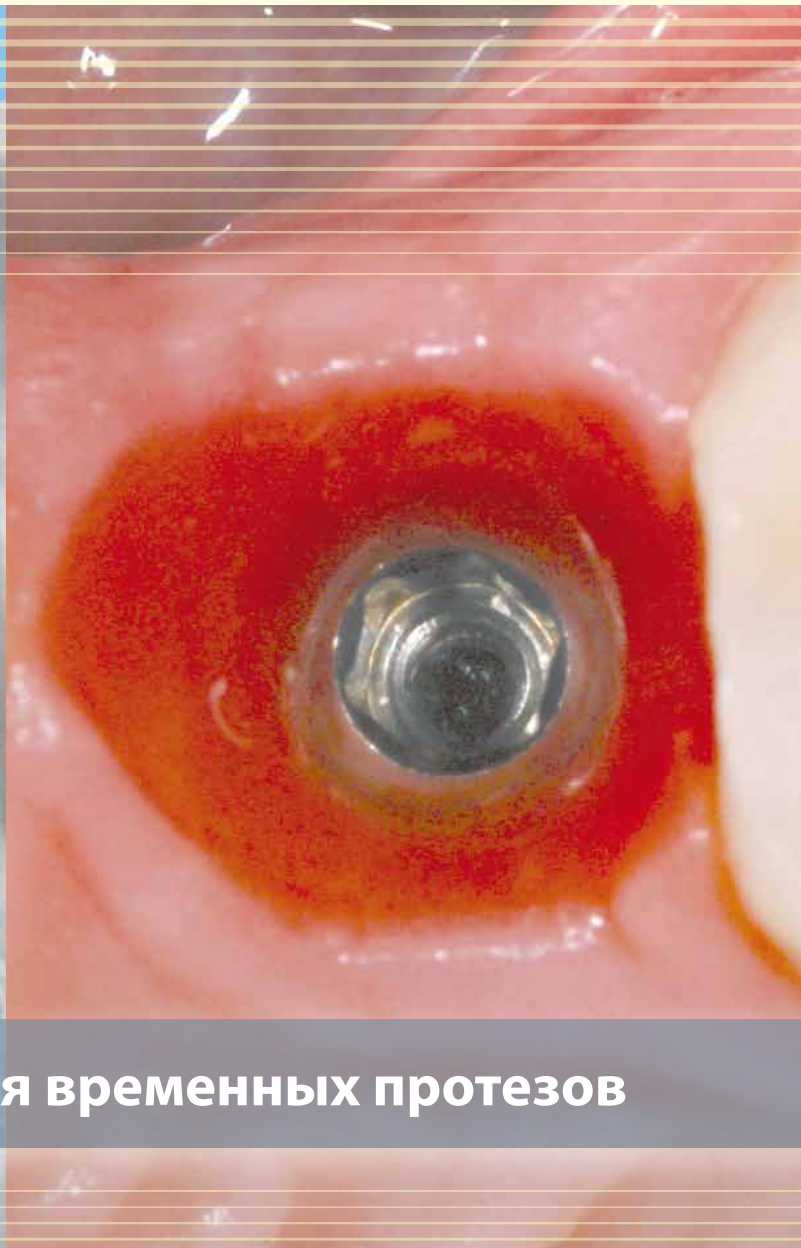

Идеальный базис для временных протезов

SKY temp

Идеальный базис для временных протезов

Требования пациентов к имплантации постоянно возрастают. Руководствуясь профессиональными и социальными требованиями, многие пациенты желают свести к минимуму период без зубов. Достойная альтернатива этому – временные протезы.

Для современных концепций имплантации как Progressive Loading, или Immediate Loading идеальны данные пластмассовые абатменты.



Преимущества:

- ▶ Оптимальное формирование дёсен при помощи трёх готовых форм
- ▶ Экстрагладкая поверхность исключает раздражения слизистой оболочки
- ▶ Простое и быстрое изготовление временных протезов

Sky temp как временный протез



SKY temp как индивидуальный формирователь дёсен



SKY temp в качестве базиса для временных протезов или индивидуальных формирователей десен обеспечивает надлежащую борозду (sulcus). Оптимально сформированная десна – это базис для эстетики высокого уровня.

Фото: д-р. Йохен Алиус, Международный центр усовершенствования по стоматологической имплантологии (IFZI)



вогнутый и выпуклый смешанная форма для

- ▶ оптимальной эстетики
- ▶ оптимального соотношения десен

Благодаря вогнутой и выпуклой смешанной форме абатмента SKY, при использовании имплантатов SKY temp сохраняется нормальное состояние десен и обеспечивается надежный результат имплантации, великолепная эстетика и удовлетворенность пациентов.


Лабораторно-техническое изготовление



1 После индивидуализации высоты абатмента выбирают подходящую фасетку.



3 Фасетку с небной стороны облицовывают соответствующим материалом для коронок или мостовидных протезов.

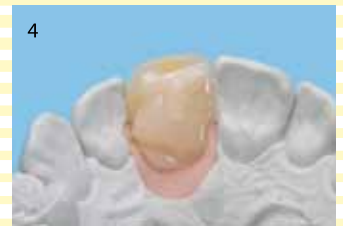

5 Надлежащая припасовка временной коронки и SKY temp гарантирует успех работы. При этом контакт настолько плотный, что часто можно отказаться от склеивания.



7 За несколько минут пациент получает эстетическое решение для своего отсутствующего зуба.



Клинический случай



1 После пробной установки временный зубной протез изготавливают в лабораторных условиях



3 В процессе заживления временный зубной протез способствует оптимальному формированию борозды.



5 После получения слепка при помощи мягкой маски для десен на модели можно изготовить эстетическую реставрацию.



7 Индивидуально изготовленный абатмент и идеально сформированная коронка – оптимальное решение для пациента.



Фото: д-р. Йохен Алиус, Международный центр усовершенствования по стоматологической имплантологии (IFZI)

Информация для заказа



SKY temp S (small)

REF SKYTEMPS


SKY temp M (medium)

REF SKYTEMPM

SKY temp L (large)

REF SKYTEMPL

Концепция лечения с SKY temp

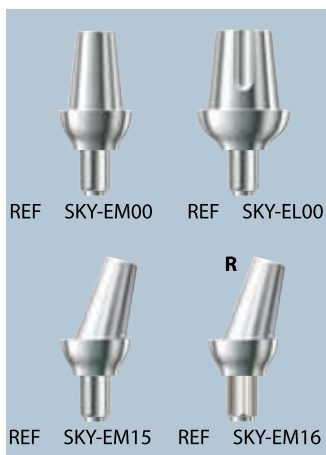

SKY esthetic line

Ортопедически и хирургически согласованные эстетические абатменты SKY temp идеальны для достижения оптимальной эстетики. В результате шлифования легко припасовываются к анатомической форме.

- Прямые абатменты с диаметром формирователя десен
- SKY esthetic M 5,5 мм
- SKY esthetic L 7,0 мм
- Угловые абатменты 15°
- индивидуализируемый до 20°
- 12 позиций для оптимального направления



Multisil – маска, мягкая Точное восстановление элементов десны

Быстрая и экономичная обработка специальным силиконом делает возможным беспрепятственное, непосредственное применение при снятии оттиска. Естественная расцветка маски десен оптимально поддерживает цвет облицовки.

REF 540 0104 7



Абатмент SKY uni.fit

Индивидуальные абатменты, легко и быстро изготавливаемые в лабораторных условиях. Эти абатменты на клейком базисе SKY uni.fit при помощи SKY temp могут быть оптимально припасованы к сформированному анатомическому контуру – кроме этого, в распоряжении техника все технологии системы CAD/CAM для копировального фрезерования и модельного литья, а также все необходимые материалы от циркона до полимерных материалов.



visio.lign система облицованных зубных протезов

Предназначена для прозрачных форм и полной стабильности

visio.lign система облицованных зубных протезов состоит из многослойных облицовочных фасеток для области фронтальных и боковых зубов, соответствующих масс для индивидуализации и дополнения, а также согласованной по цвету системы облицовок. Завершают ассортимент массы для создания искусственных зубов и десны.

Особенно в ортопедической конструкции с опорой на имплантат сочетаются эстетика, надежная фиксация, стойкость цвета и экономия затрат.

bredent medical благодарит д-ра Йохена Алиуса и Анне Грессковски Международный центр усовершенствования по стоматологической имплантологии (IFZI, Нюрнберг) за предоставленные фотографии

